



RiseAtlas450M™ med QuickTrolleySystem

SystemRoMedic™

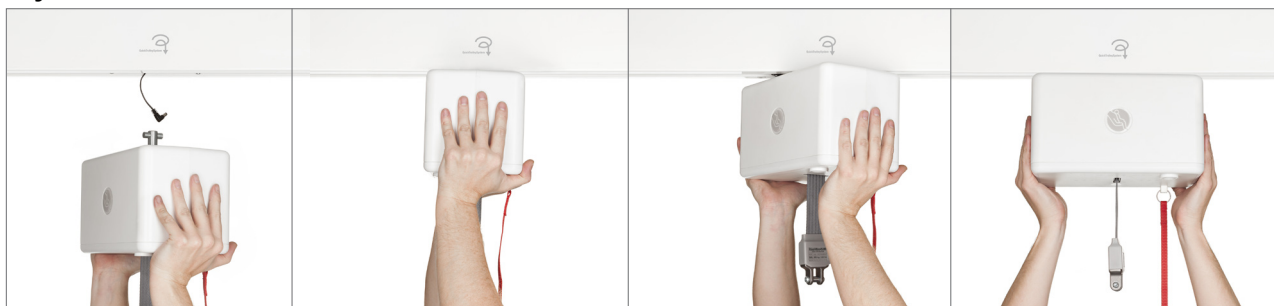

QuickTrolleySystem letter både montering og afmontering af løftemodulet fra skinnen. QuickTrolleySystem gør det også muligt at flytte løftemodulet mellem forskellige skinnedsystemer i forskellige rum for en bedre udnyttelsesgrad og omkostningseffektivitet.

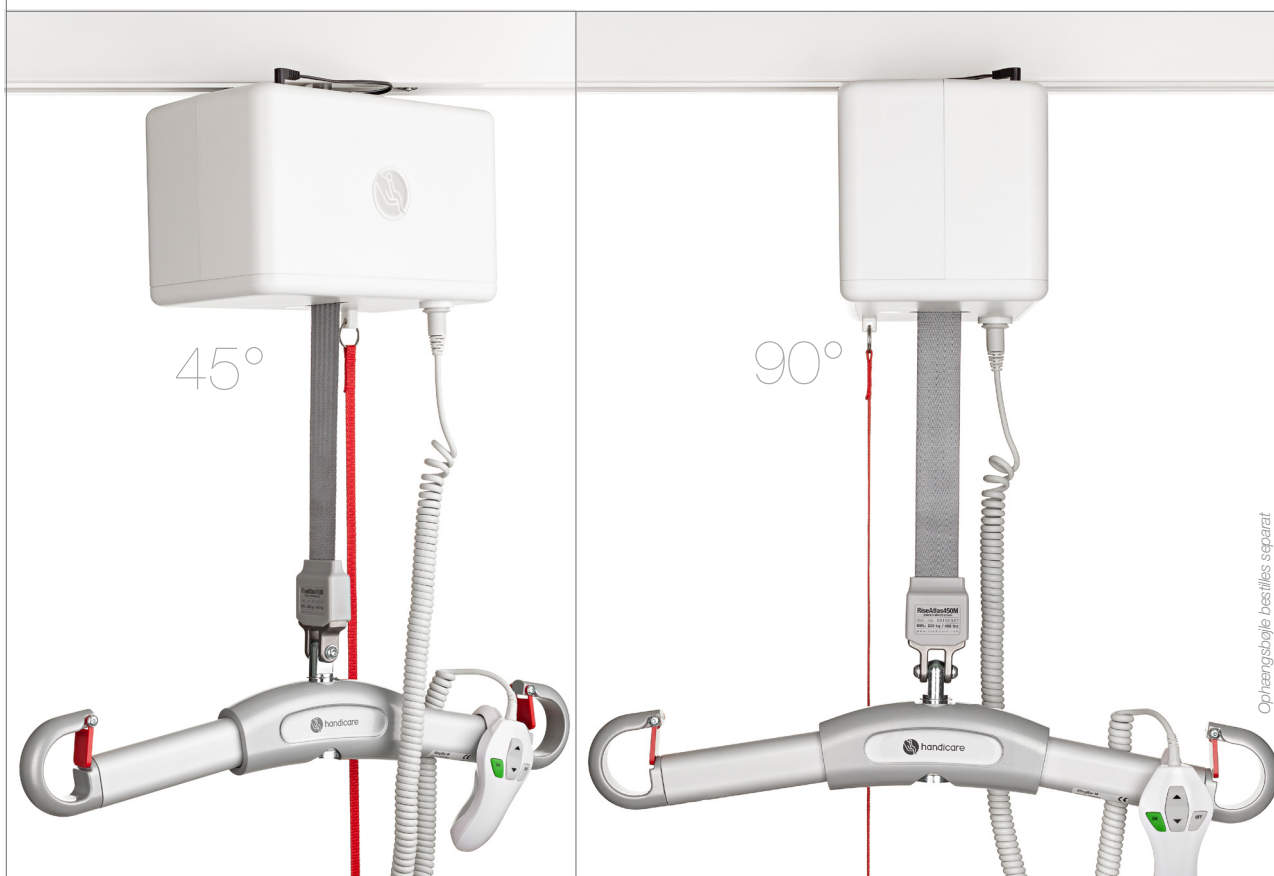

Med QuickTrolleySystem kan løftemodulet og løftestroppen nemt forudindstilles til en vinkel på 45° eller 90° mod skinnen for jævn og bekvem forflytning af brugere fra et rum til et andet.

Opladningsbøjle bestilles separat

Ubegrænsede løftemuligheder - for brugere, som vejer op til 205 kg


- SWL 205 kg
- Manuel forflytning i skinnen
- Moderne, elegant og hygiejnisk design
- Usædvanligt små ydermål og ekstremt lav vægt
- Til alle skinnedsystemer, i alle miljøer og i alle typer af rum
- Stort løfteområde og mulighed for både meget lave og meget høje løft
- Til alle situationer, brugere og behov
- Handicares unikke SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem giver betydeligt mere fleksibilitet, alsidighed og brugervenlighed
- Meget enkel at anvende, giver sikre arbejdsforhold og gør det muligt for hjælperen at være tæt på brugeren under hele løftet
- Lydløse, bløde bevægelser samt blød start og stop
- Ergonomisk og brugervenlig håndbetjening
- Tænd- og Sluk-knapperne på håndbetjeningen forebygger utilsigtet brug af løftløfterens funktioner
- Manuelt nødstop
- Elektrisk og manuelt nødфир
- Overbelastningsbeskyttelse
- Faldsikring
- Motoren standser automatisk, hvis løftestroppen ikke belastes
- Natlys
- Effektiv løftestroppkontrol
- funktion forhindrer utilsigtet vridning af løftestroppen
- Miljøvenligt NiMH-batteri med høj kapacitet
- Enkel og bekvem opladning med håndbetjening
- Unik opladeløsning med en trolley for to alternative opladningsmetoder (opladning i skinne/opladningsstation) fås som tilbehør
- Diskret informationspanel
- Servicevenlig
- Diagnostik: en speciel software, der fås som ekstraudstyr, gør det muligt via en PC at få adgang til yderligere oplysninger om løftløfteren
- Meget tilbehør for sikre, enkle og individuelt tilpassede løft af brugere i de fleste forflytningssituationer

RiseAtlas450M™ med QuickTrolleySystem

Til professionelle og meget funktionelle plejemiljøer med en harmonisk og menneskelig atmosfære.

Enkel og bekvem opladning med håndbetjening er standard

Opladningsstationen til loftløfteren er integreret i en lille, diskret holder og parkeringsplads til håndbetjeningen. Opladningsstationen monteres nemt på væggen, tæt på loftløfterens parkeringsplads.

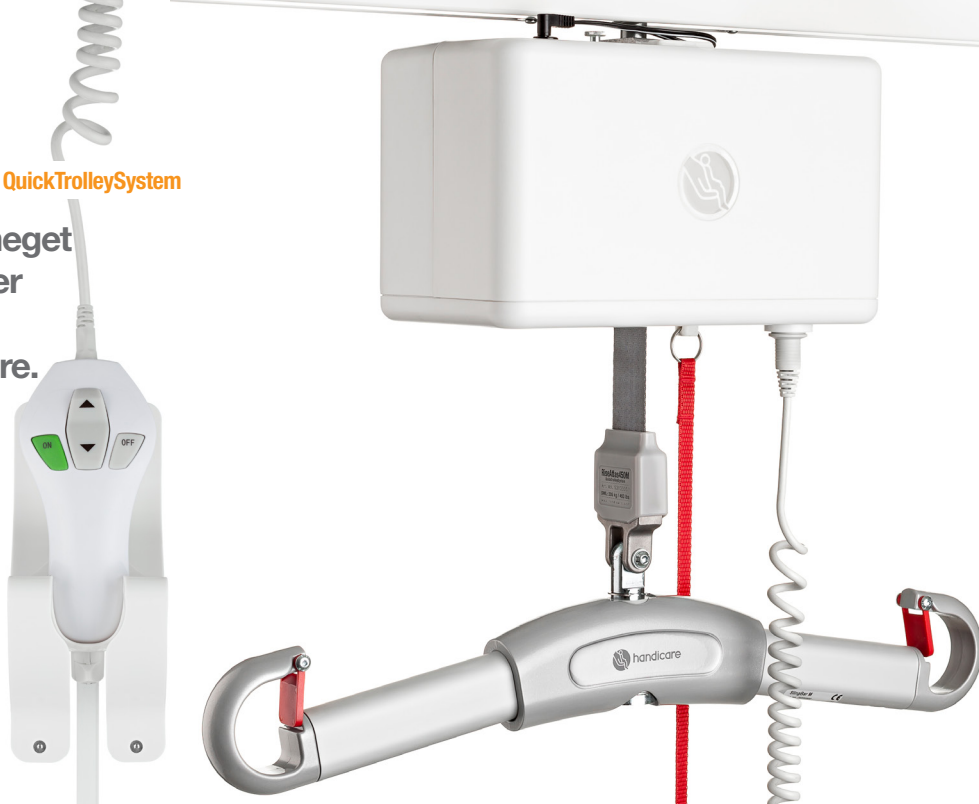

PRODUKTSPECIFIKATION

Varenr. Produkt

50100057 ___ RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem

RiseAtlas450M, leveres udstyret med håndbetjening og oplader. Ophængsbøjle bestilles separat.

TILBEHØR

Varenr.	Produkt	Beskrivelse
70200046	QuickTrolley450	Quick release trolley
70200051	QuickTrolley450 70 mm	Quick release trolley, sænker loftmodulet med 70 mm
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Quick release trolley, drejebart 360 grader
70200062	In-rail/end point charging	Opladning i skinne/opladningsstation
70200065	IR remote controlling	For trådløs manøvrering
70200047	9V battery and cable	Batteri og kabel, til nødfrir
70200048	Software for diagnostics	Software til diagnostik
50400066	Cover to charger	Cover til oplader, til alle modeller og specialversioner af RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Tavle til nem opbevaring af ophængsbøjler, manualer
50400332	Parking Placard BariBar	Til bekvem opbevaring af BariBar og sejl
70200071	SlingBar XS	Ophængsbøjle, 250 mm
70200001	SlingBar S	Ophængsbøjle, 350 mm
70200002	SlingBar M	Ophængsbøjle, 450 mm
70200003	SlingBar L	Ophængsbøjle, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidebøjler til SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Løfteåg med 4-punkts ophæng til løftemodul, max belastning 450 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Løfteåg med 4-punkts ophæng, max belastning 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Forlængerstropper, 6 længder: 370-970 mm

TEKNISK INFORMATION

Max. belastning:	_____	205 kg
Materiale, chassis:	_____	Aluminium
Materiale, cover:	_____	Ikke brandbart ABS-plastik
Mål, længde x bredde x højde:	_____	266 x 151 x 156 mm
Vægt:	_____	7,2 kg
Forflytning i skinne:	_____	Manuel
Håndbetjening:	_____	Elektrisk, 4 knapper
Løfteområde:	_____	2400 mm
Løfthastighed, uden belastning:	_____	50 mm per sek
Løfthastighed, med belastning:	_____	39 mm per sek
Lydniveau, med belastning:	_____	55 dB(A)
Effektiv kontrol af løftestrop:	_____	Standard
Nødfrir:	_____	Elektrisk og manuelt
Nødstop:	_____	Manuelt
Natlys:	_____	Standard
Batteri:	_____	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Håndbetjeningsopladning:	_____	Standard
Opladning i skinne:	_____	Valgfri, tilbehør
Fast opladningsstation:	_____	Valgfri, tilbehør
Tæthedegrad, løftemodul:	_____	IP20
Tæthedegrad, håndbetjening:	_____	IPX4



RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr, klasse 1-produkter 93/42/EOF.

Se www.handicare.dk for yderligere information.



handicare

Handicare
Jernholmen 41
DK-2650 Hvidovre
Denmark
T +45 70 22 43 41
F +45 70 22 43 47
info@handicare.dk
www.handicare.dk

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.