



RiseAtlas450M™ med QuickTrolleySystem, high humidity SystemRoMedic™

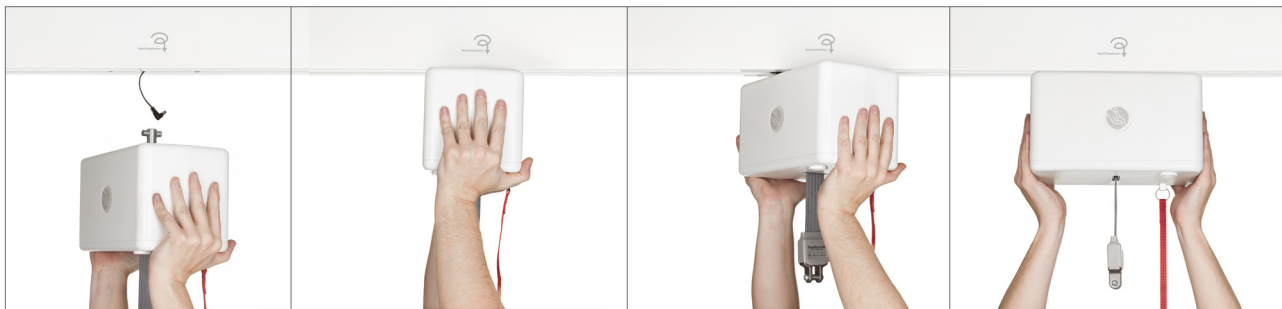

QuickTrolleySystem letter både montering og afmontering af løftemodul fra skinnen. QuickTrolleySystem gør det også muligt at flytte løftemodul mellem forskellige skinnedsystemer i forskellige rum for en bedre udnyttelsesgrad og omkostningseffektivitet.

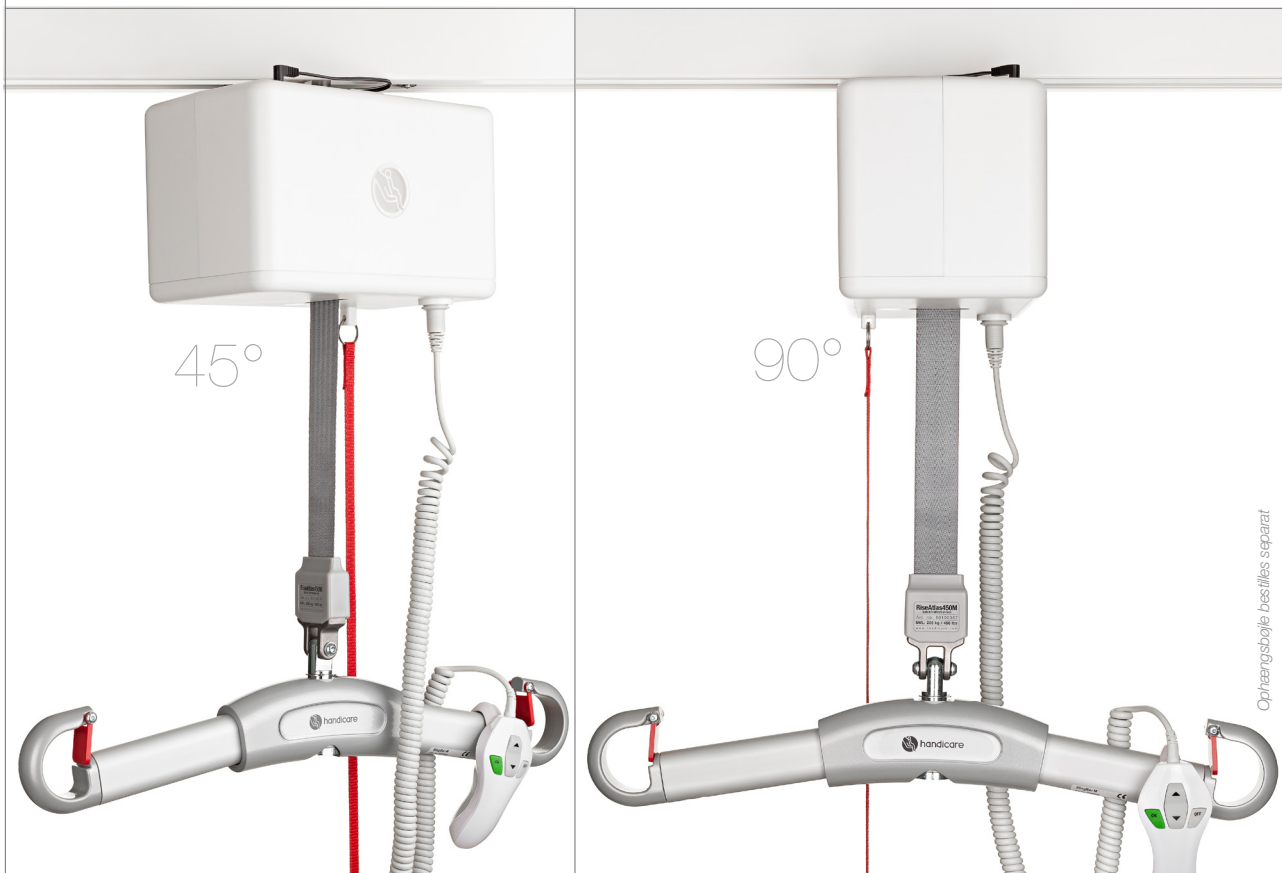

Oplæsningsbøjle bestilles separat

Med QuickTrolleySystem kan løftemodul og løftestroppen nemt forudindstilles til en vinkel på 45° eller 90° mod skinnen for jævn og bekvem forflytning af brugere fra et rum til et andet.

Specialversion til fugtige miljøer - for brugere, som vejer op til 205 kg

- SWL 205 kg
- Manuel forflytning i skinnen
- Specialversion til brug i miljøer, hvor der forekommer fugt og væde
- Moderne, elegant og hygiejnisk design
- Usædvanligt små ydermål og ekstremt lav vægt
- Til alle skinnedsystemer, i alle miljøer og i alle typer af rum
- Stort løfteområde og mulighed for både meget lave og meget høje løft
- Til alle situationer, brugere og behov
- Handicares unikke SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem giver betydeligt mere fleksibilitet, alsidighed og brugervenlighed
- Meget enkel at anvende, giver sikre arbejdsforhold og gør det muligt for hjælperen at være tæt på brugeren under hele løftet
- Lydløse, bløde bevægelser samt blød start og stop
- Ergonomisk og brugervenlig håndbetjening
- Tænd- og Sluk-knapperne på håndbetjeningen forebygger utilsigtet brug af loftløfterens funktioner
- Manuelt nødstop
- Elektrisk og manuelt nødfor
- Overbelastningsbeskyttelse
- Faldsikring
- Motoren standser automatisk, hvis løftestroppen ikke belastes
- Natlys
- Effektiv løftestroppkontrol funktion forhindrer utilsigtet vridning af løftestroppen
- Miljøvenligt NiMH-batteri med høj kapacitet
- Unik opladeløsning med en trolley for to alternative opladningsmetoder (opladning i skinne/opladningsstation) fås som tilbehør
- Diskret informationspanel
- Servicevenlig
- Diagnostik: en special software, der fås som ekstraudstyr, gør det muligt via en PC at få adgang til yderligere oplysninger om loftløfteren
- Meget tilbehør for sikre, enkle og individuelt tilpassede løft af brugere i de fleste forflytningssituationer

RiseAtlas450M™ med QuickTrolleySystem, high humidity

Til professionelle og meget funktionelle plejemiljøer med en harmonisk og menneskelig atmosfære.



Ergonomisk og brugervenlig håndbetjening



PRODUKTSPECIFIKATION

Varenr. Produkt

50100051 ___ RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity

RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity leveres udstyret med håndbetjening og oplader. Ophængsbøjle bestilles separat.

TILBEHØR

Varenr.	Produkt	Beskrivelse
70200046	QuickTrolley450	Quick release trolley
70200051	QuickTrolley450 70 mm	Quick release trolley, sænker loftmodulet med 70 mm
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Quick release trolley, drejebær 360 grader
70200048	Software for diagnostics	Software til diagnostik
50400066	Cover to charger	Cover til oplader, til alle modeller og specialversioner af RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Tavle til nem opbevaring af ophængsbøjler, manualer og løftesejl
50400332	Parking Placard BariBar	Til bekvem opbevaring af BariBar og sejl
70200071	SlingBar XS	Ophængsbøjle, 250 mm
70200001	SlingBar S	Ophængsbøjle, 350 mm
70200002	SlingBar M	Ophængsbøjle, 450 mm
70200003	SlingBar L	Ophængsbøjle, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidebøjler til SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Løfteåg med 4-punkts ophæng til løftemodul, max belastning 450 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Løfteåg med 4-punkts ophæng, max belastning 300 kg
70200053		
70200058	Lift strap extension	Forlængerstropper, 6 længder: 370-970 mm

TEKNISK INFORMATION

Max. belastning: _____ 205 kg
Materiale, chassis: _____ Aluminium
Materiale, cover: _____ Ikke brandbart ABS-plastik
Mål, længde x bredde x højde: _____ 266 x 151 x 156 mm
Vægt: _____ 7,3 kg
Forflytning i skinnen: _____ Manuel
Håndbetjening: _____ Elektrisk, 4 knapper
Løfteområde: _____ 2400 mm
Løfthastighed, uden belastning: _____ 50 mm per sek
Løfthastighed, med belastning: _____ 39 mm per sek
Lydniveau, med belastning: _____ 55 dB(A)
Effektiv kontrol af løftestrop: _____ Standard
Nødfir: _____ Elektrisk og manuelt
Nødstop: _____ Manuelt
Natlys: _____ Standard
Batteri: _____ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Håndbetjeningsopladning: _____ Nej
Opladning i skinne: _____ Valgfri, standard
Fast opladningsstation: _____ Valgfri, standard
Tæthedegrad, løftemodul: _____ IPX4
Tæthedegrad, håndbetjening: _____ IPX4



CE RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr, klasse 1-produkter 93/42/EOF.

Se www.handicare.dk for yderligere information.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.



handicare

Handicare
Jernholmen 41
DK-2650 Hvidovre
Denmark
T +45 70 22 43 41
F +45 70 22 43 47
info@handicare.dk
www.handicare.dk