


# RiseAtlas450T™

SystemRoMedic™

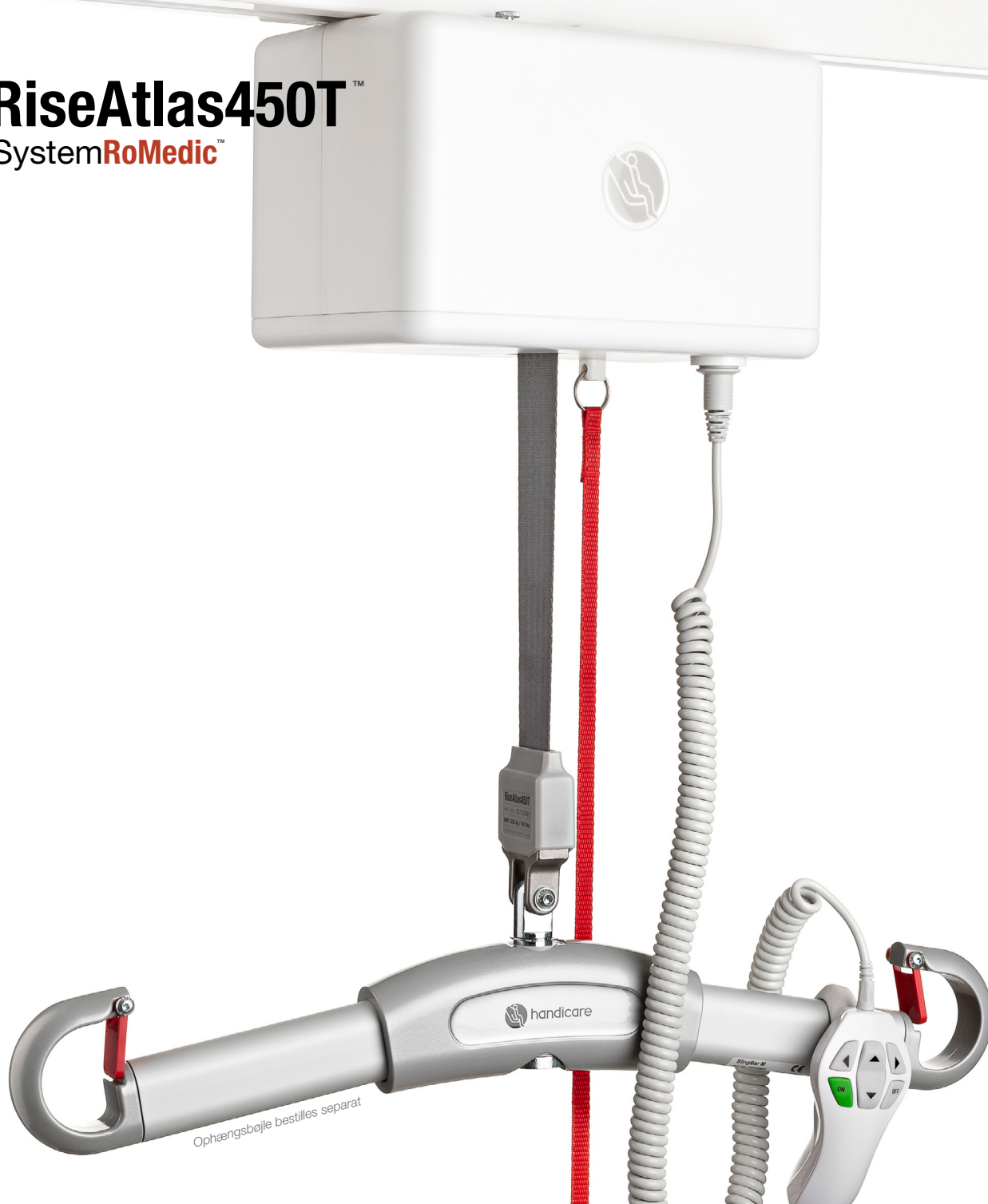

Ophængsbojle bestilles separat

## Ubegrænsede løftemuligheder - for brugere, som vejer op til 205 kg

- SWL 205 kg
- Elektrisk forflytning i skinnen
- Moderne, elegant og hygiejnisk design
- Usædvanligt små ydermål og ekstremt lav vægt
- Til alle skinnede systemer, i alle miljøer og i alle typer af rum
- Stort løfteområde og mulighed for både meget lave og meget høje løft
- Til alle situationer, brugere og behov
- Meget enkel at anvende, giver sikre arbejdsforhold og gør det muligt for medhjælperen at være tæt på brugeren under hele forflytningen
- Lydløse, bløde bevægelser samt blød start og stop
- Ergonomisk og brugervenlig håndbetjening
- Tænd- og Sluk-knapperne på håndbetjeningen forebygger utilsigtet brug af løftløfterens funktioner
- Manuelt nødstop
- Elektrisk og manuelt nødfor
- Overbelastningsbeskyttelse
- Faldsikring
- Motoren standser automatisk, hvis løftestroppen ikke belastes
- Natlys
- Effektiv løftestropkontrol funktion forhindrer utilsigtet vridning af løftestroppen
- Miljøvenligt NiMH-batteri med høj kapacitet
- Enkel og bekvem opladning med håndbetjening
- Unik opladeløsning med en trolley for to alternative opladningsmetoder (opladning i skinne/opladningsstation) fås som tilbehør
- Diskret informationspanel
- Servicevenlig
- Diagnostik: en speciel software, der fås som ekstraudstyr, gør det muligt via en PC at få adgang til yderligere oplysninger om løftløfteren
- Meget tilbehør for sikre, enkle og individuelt tilpassede løft af brugere i de fleste forflytningssituationer

# RiseAtlas450T™

Til professionelle og meget funktionelle plejemiljøer med en harmonisk og menneskelig atmosfære.



## Enkel og bekvem opladning med håndbetjening er standard

Opladningsstationen til løftløfteren er integreret i en lille, diskret holder og parkeringsplads til håndbetjeningen. Opladningsstationen monteres nemt på væggen, tæt på løftløfterens parkeringsplads.



## PRODUKTSPECIFIKATION

Varenr. Produkt  
50100058 RiseAtlas450T

RiseAtlas450T leveres udstyret med håndbetjening og oplader. Ophængsbojle bestilles separat.

## TILBEHØR

Varenr.	Produkt	Beskrivelse
70200062	In-rail/end point charging	Opladning i skinne/ opladningsstation
70200047	9V battery and cable	Batteri og kabel, til nødфир
70200048	Software for diagnostics	Software til diagnostik
50400066	Cover to charger	Cover til oplader, til alle modeller og specialversioner af RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Tavle til nem opbevaring af ophængsbojler, manualer og løftesejl
50400332	Parking Placard BariBar	Til bekvem opbevaring af BariBar og sejl
70200071	SlingBar XS	Ophængsbojle, 250 mm
70200001	SlingBar S	Ophængsbojle, 350 mm
70200002	SlingBar M	Ophængsbojle, 450 mm
70200003	SlingBar L	Ophængsbojle, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidebojler til SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Løfteåg med 4-punkts ophæng til løftemodul, max belastning 450 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Løfteåg med 4-punkts ophæng, max belastning 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Forlængerstropper, 6 længder: 370-970 mm

## TEKNISK INFORMATION

Max. belastning: \_\_\_\_\_ 205 kg  
Materiale, chassis: \_\_\_\_\_ Aluminium  
Materiale, cover: \_\_\_\_\_ Ikke brandbart ABS-plastik  
Mål, længde x bredde x højde: \_\_\_\_\_ 266 x 151 x 156 mm  
Vægt: \_\_\_\_\_ 7,5 kg  
Forflytning i skinnen: \_\_\_\_\_ Elektrisk fremdrift  
Hastighed ved forflytning i skinnen, uden belastning: \_\_\_\_\_ 140 mm per sek  
Hastighed ved forflytning i skinnen, med belastning: \_\_\_\_\_ 120 mm per sek  
Håndbetjening: \_\_\_\_\_ Elektrisk, 6 knapper  
Løfteområde: \_\_\_\_\_ 2400 mm  
Løftehastighed, uden belastning: \_\_\_\_\_ 50 mm per sek  
Løftehastighed, med belastning: \_\_\_\_\_ 39 mm per sek  
Lydniveau, med belastning: \_\_\_\_\_ 55 dB(A)  
Effektiv kontrol af løftestrop: \_\_\_\_\_ Standard  
Nødфир: \_\_\_\_\_ Elektrisk og manuelt  
Nødstop: \_\_\_\_\_ Manuelt  
Natlyt: \_\_\_\_\_ Standard  
Batteri: \_\_\_\_\_ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh  
Håndbetjeningsopladning: \_\_\_\_\_ Standard  
Opladning i skinne: \_\_\_\_\_ Valgfri, tilbehør  
Fast opladningsstation: \_\_\_\_\_ Valgfri, tilbehør  
Tæthedegrad, løftemodul: \_\_\_\_\_ IP20  
Tæthedegrad, håndbetjening: \_\_\_\_\_ IPX4



RiseAtlas450T opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr, klasse 1-produkter 93/42/EOF.

Se [www.handicare.dk](http://www.handicare.dk) for yderligere information.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

**Överflyttning**, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

**Stöd**, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.



# handicare

Handicare  
Jernholmen 41  
DK-2650 Hvidovre  
Denmark  
T +45 70 22 43 41  
F +45 70 22 43 47  
info@handicare.dk  
www.handicare.dk