

MiniLift125

SystemRoMedic™

SWL
125 kg

Letindstillelig løftearm

Let at manøvrere

Grebsvenlige håndtag og sidestøtter giver flere muligheder for placering af brugerens hænder

Quick guide på løfteren

Unikt bevægelsesmønster ved oprejsning

Batteri med høj kapacitet og lang driftstid

Kompakt format

Indbygget opladning

Blød, justerbar underbensstøtte


Låsbar baghjul

Fodplade med lav indstigningshøjde og skridsikker overflade

Elektrisk benspredning

En unik løsning til at rejse sig aktivt – med elektrisk benspredning

MiniLift125 er en mobil personløfter, som anvendes i kombination med en specielt tilpasset løftevest for at hjælpe brugere med nedsat funktionsevne med at rejse sig fra siddende til stående stilling. MiniLift125 har en konstruktion, som tilbyder en helt unik og ekstremt bekvem måde at rejse sig på. Løfteren er også kompakt og praktisk og meget enkel at manøvrere; egenskaber som - sammen med muligheden for at tilpasse indstillingerne optimalt for hver enkelt bruger - gør den meget anvendelig de fleste steder og i de fleste situationer.

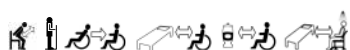

MiniLift125

Ekstremt bekvem - at rejse sig aktivt med et naturligt bevægelsesmønster

MiniLift125 er udviklet til at assistere brugeren i forbindelse med at rejse sig fra siddende til stående stilling på en så bekvem og skånsom måde som muligt. Håndtagene og sidestøtterne giver flere forskellige muligheder for placering af brugerens hænder. Den stabile, skridsikre fodplade har lav indstigningshøjde, og underbensstøtten kan, ligesom løftearmen, justeres til at passe optimalt til hver enkelt bruger. Når MiniLift125 anvendes i kombination med det rette løftetilbehør, får brugeren støtte under fødderne, mod forsiden af underbenene og bag ryggen, hvilket betyder, at det er trygt, sikkert og samtidig aktivt at rejse sig op. Konstruktionen løfter brugeren fremad og opad i et naturligt bevægelsesmønster, samtidig med at benmuskler og balance trænes. MiniLift125 er fremstillet i stål for styrke og stabilitet og kan anvendes til brugere, som vejer op til 125 kg.

At rejse sig aktivt med et naturligt bevægelsesmønster.



PRODUKTSPECIFIKATION

MiniLift125 ___ Mobil personløfter med elektrisk benspredning _____ Art. nr. 400641434

TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) _____	125 kg
Brugerens højde, min.-max. _____	140 cm-200 cm
Materiale _____	Pulverlakeret stål
Højde _____	995 mm
Længde _____	900 mm
Bredde, understel, ydermål _____	600 - 890 mm
Bredde, understel, indermål _____	445 - 745 mm
Vægt _____	39 kg
Benspredning _____	Elektrisk
Fodplade, højde, for bruger _____	50 mm
Hjul, diameter _____	80 mm
Løfthastighed, uden belastning _____	35 mm/s
Nødsænkning _____	Manuel og elektrisk



MiniLift125 opfylder kravene til klasse 1-produkter i det Medicintekniske direktiv 93/42/EEG.








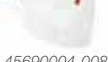



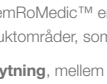


Ergonomisk og let-anvendelig håndbetjening med 4 knapper



Ny kontrolboks med diagnostik, f.eks. udregning af løft og indikation af overbelastning.

Elektrisk nødstopknop let-tilgængeligt placeret på kontrolboksen.

TILBEHØR

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
 45500003-009	ThoraxSling	Polyester, X-Small
 45500004-009	ThoraxSling	Polyester, Small
 45500006-009	ThoraxSling	Polyester, Medium
 45500007-009	ThoraxSling	Polyester, Large
 45500008-009	ThoraxSling	Polyester, X-Large
 45500009-009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
 45550004	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, Small
 45550007	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, Medium
 45550008	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, Large
 45550009	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, X-Large
 45590004	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, XX-Large
 45590004	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, Small, 5 stk.
 45590006	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, Medium, 5 stk.
 45590007	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, Large, 5 stk.
 45590008	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, X-Large, 5 stk.
 45600004	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, Small
 45600006	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, Medium
 45600007	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, Large
 45600008	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, X-Large
 45690004	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, Small, 5 stk.
 45690006	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, Medium, 5 stk.
 45690007	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, Large, 5 stk.
 45690008	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, X-Large, 5 stk.
 70200033	Calf Strap,	Læggbånd til MiniLift200 med serienummer fra 200001277
 70200012	Sling Bar Wrap	MiniLift, Blødt cover til bøjen til MiniLift200 (kan afsprittes)
 70200089	Hand control HB33-6	Håndbetjening med 6 knapper. Med service-, batteristatus- samt overbelastningsindikation
 70200029	External charger Linak	Ekstern oplader til alle modeller og varianter af MiniLift

ThoraxSling SystemRoMedic™

ThoraxSling er en specialtilpasset og meget bekvem oprejsningsvest, som anvendes sammen med Handicares SystemRoMedic™ MiniLift personløftere. Den er let at anvende for hjælperen, samtidig med at den giver brugeren en ekstra følelse af tryghed i forbindelse med at rejse sig samt ved ståtræning. ThoraxSling er også en hjælp i forbindelse med toiletbesøg. ThoraxSling findes i to modeller: en som støtter bag ryggen (ThoraxSling), og en som også støtter under bagdelen (ThoraxSling, med sædestotte), samt i mange materialer og størrelser.

Flere modeller og varianter af MiniLift mobile personløftere.

MiniLift findes i flere modeller og varianter med forskellig løftekapacitet, med elektrisk eller manuel benspredning samt med standardhøje eller lave ben til brug ved lave senge.

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
401100334	MiniLift200	Mobil personløfter med elektrisk benspredning, SWL 200 kg
60300010	MiniLift160EM	Mobil personløfter med manuel benspredning, SWL 160 kg
60300011	MiniLift160EM	Mobil personløfter med manuel benspredning, lave ben, SWL 160 kg
60300012	MiniLift160EE	Mobil personløfter med elektrisk benspredning, SWL 160 kg
60300013	MiniLift160EE	Mobil personløfter med elektrisk benspredning, lave ben, SWL 160 kg

Besøg gerne vores hjemmeside, www.handicare.dk, for mere information



handicare

Jernholmen 41
DK-2650 Hvidovre
Denmark
T +45 70 22 43 41
F +45 70 22 43 47
info@handicare.dk
www.handicare.dk

SystemRoMedic™ er en helhedsløsning til enkle forflytninger. I konceptet indgår fire produktområder, som tilgodeser de aller fleste behov i forskellige forflytningssituationer.

Forflytning, mellem to Enheder. **Positionering**, inden for samme Enhed. **Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.