

MiniLift160EM/EE

SystemRoMedic™

SWL
160 kg

Grebsvenlige håndtag og sidestøtter giver flere muligheder for placering af brugerens hænder

Justerbar løftearm, enkel at justere

Unikt bevægelsesmønster i forbindelse med at rejse sig op

Let at manøvrere

Kompakt format

Quick guide på løfteren

Blød, justerbar underbensstøtte

Batteri med høj kapacitet og lang driftstid

Indbygget opladning

Fodplade med lav indstigningshøjde og skridsikker overflade

Låsbare baghjul


Elektrisk eller manuel benspredning

Findes også med lave ben til brug ved lave senge

Letkørende, vedligeholdelsesfri hjul (på varianter med ben i standardhøjde)

En unik løsning til at rejse sig aktivt – findes i fire varianter

MiniLift160 er en mobil personløfter, som anvendes i kombination med en specielt tilpasset løftevest for at hjælpe brugere med nedsat funktionsevne med at rejse sig fra siddende til stående stilling. MiniLift160 har en konstruktion, som tilbyder en helt unik og ekstremt bekvem måde at rejse sig på. Løfteren er også kompakt og praktisk og meget enkel at manøvrere; egenskaber som - sammen med muligheden for at tilpasse indstillingerne optimalt for hver enkelt bruger - gør den meget anvendelig de fleste steder og i de fleste situationer. MiniLift160 har en unik kombination af funktionalitet, ydeevne og kvalitet i forhold til pris. Økonomien bliver ikke bedre end det her!

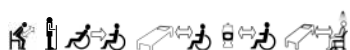

MiniLift160EM/EE

Ekstremt bekvem - at rejse sig aktivt med et naturligt bevægelsesmønster

MiniLift160 er udviklet til at assistere brugeren i forbindelse med at rejse sig fra siddende til stående stilling på en så bekvem og skånsom måde som muligt. Håndtagene og sidestøtterne giver flere forskellige muligheder for placering af brugerens hænder. Den stabile, skridsikre fodplade har lav indstigningshøjde, og underbensstøtten kan, ligesom løftearmen, justeres til at passe optimalt til hver enkelt bruger. Når MiniLift160 anvendes i kombination med det rette løftetilbehør, får brugeren støtte under fødderne, mod forsiden af underbenene og bag ryggen, hvilket betyder, at det er trygt, sikkert og samtidig aktivt at rejse sig op. Konstruktionen løfter brugeren fremad og opad i et naturligt bevægelsesmønster, samtidig med at benmuskler og balance trænes.

MiniLift160 findes i fire varianter med elektrisk eller manuel benspredning samt med standardhøje eller lave ben til brug ved lave senge. Alle varianter er fremstillet i stål for styrke og stabilitet og kan anvendes til brugere, som vejer op til 160 kg.



Ergonomisk og let-anvendelig håndbetjening med 2 (EM) hhv. 4 (EE) knapper.



Ny kontrolboks med diagnostik, f.eks. udregning af loft og indikation af overbelastning.

Elektrisk nødstopknop let-tilgængeligt placeret på kontrolboksen.

PRODUKTSPECIFIKATION

Produkt navn	Beskrivelse	Art. nr.
MiniLift160EM	Mobil personløfter med manuel benspredning	60300010
MiniLift160EM	Mobil personløfter med manuel benspredning, lave ben	60300011
MiniLift160EE	Mobil personløfter med elektrisk benspredning	60300012
MiniLift160EE	Mobil personløfter med elektrisk benspredning, lave ben	60300013







TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL)	160 kg
Brugerens højde, min.-max.	1400 mm-2000 mm
Materiale	Pulverlakeret stål
Højde	980 mm
Længde, understel	919 mm
Længde, sammenklappet	1098 mm
Bredde, understel, ydermål	669 - 959 mm
Bredde, understel, indermål	531 - 773 mm
Vægt	40,5 kg
Benspredning, EM	Manuelt
Benspredning, EE	Elektrisk
Fodplade, højde, for bruger	59 mm
Hjul, diameter, 60300010 og 60300012	100 mm
Hjul bag, diameter, 60300011 og 60300013	100 mm
Hjul for, diameter, 60300011 og 60300013	70 mm
Løfthastighed, uden belastning	35 mm/s
Nødsænkning	Manuel og elektrisk



MiniLift160 opfylder kravene til klasse 1-produkter i det Medicintekniske direktiv 93/42/EEG.

TILBEHØR

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
 45500003-009	ThoraxSling	Polyester, X-Small
 45550004-009	ThoraxSling	Polyester, Small
 45600004-008	ThoraxSling	Polyester, Medium
 45690004	ThoraxSling	Polyester, Large
 45690007	ThoraxSling	Polyester, X-Large
 45690008	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
45550006	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, Small
45550007	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, Medium
45550008	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, Large
45550009	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, X-Large
45590004	ThoraxSling	Wipeable, materiale der kan afsprittes, XX-Large
45590006	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, Small, 5 stk.
45590007	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, Medium, 5 stk.
45590008	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, Large, 5 stk.
45590009	ThoraxSling	Engangsmateriale, non-woven, X-Large, 5 stk.
45600004	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, Small
45600006	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, Medium
45600007	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, Large
45600008	ThoraxSling	Med sædestotte, polyester, X-Large
45690004	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, Small, 5 stk.
45690006	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, Medium, 5 stk.
45690007	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, Large, 5 stk.
45690008	ThoraxSling	Med sædestotte, engangsmateriale, non-woven, X-Large, 5 stk.
70200033	CalfStrap	Lægband til MiniLift160
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Blødt cover til bøjlen til MiniLift160 (kan afsprittes)
70200089	Hand control HB33-6	Håndbetjening med 6 knapper. Med service-, batteristatus- samt overbelastningsindikation, til MiniLift160EE, 60300012 og 60300013
70200029	External charger Linak	Ekstern oplader til alle modeller og varianter af MiniLift

ThoraxSling SystemRoMedic™

ThoraxSling er en specialtilpasset og meget bekvem oprejsningsvest, som anvendes sammen med Handicares SystemRoMedic™ MiniLift personløftere. Den er let at anvende for hjælperen, samtidig med at den giver brugeren en ekstra følelse af tryghed i forbindelse med at rejse sig samt ved ståtræning. ThoraxSling er også en hjælp i forbindelse med toiletbesøg. ThoraxSling findes i to modeller: en som støtter bag ryggen (ThoraxSling), og en som også støtter under bagdelen (ThoraxSling, med sædestotte), samt i mange materialer og størrelser.

Flere modeller og varianter af MiniLift mobile personløftere.

MiniLift findes i yderligere to modeller med forskellig løftekapacitet. Begge har elektrisk benspredning samt standardhøje ben.

Art. nr.	Produkt navn	Beskrivelse
401100334	MiniLift200	Mobil personløfter med elektrisk benspredning, SWL 200 kg
400641434	MiniLift125	Mobil personløfter med elektrisk benspredning, SWL 125 kg

Besøg gerne www.handicare.dk, for mere information.

SystemRoMedic™ er en helhedsløsning til enkle forflytninger. I konceptet indgår fire produktområder, som tilgodeser de allerfleste behov i forskellige forflytningssituationer.

Forflytning, mellem to Enheder. **Positionering**, inden for samme Enhed. **Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.



handicare

Jernholmen 41
DK-2650 Hvidovre
Denmark
T +45 70 22 43 41
F +45 70 22 43 47
info@handicare.dk
www.handicare.dk